

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Názov produktu	VIBRA BELT GENIUS
Model č.	MC0179
Vstup	AC 240V 50Hz or AC 110V 50Hz
Výstup	DC24V
Spotreba elektrickej energie	24 W

DÔLEŽITÉ INŠTRUKCIE. USCHOVAJTE K NESKORŠIEMU NAHLIADNUTIU.

Neprepichujte špendlíkmi a pod.  Čítajte návod. 

Vždy používajte len originálny adaptér dodávaný v balení! Použitím iného adaptéru sa vystavujete nebezpečenstvu poškodenia prístroja a najmä vážnemu úrazu.

Adaptér - Model č. GPE241-24100W

Vstup : 100-240V ~ 1.0A 47-63Hz

Výstup: +24V d.c. 1.0A max



Pravidelne prístroj vrátane prívodného kábla a adaptéru kontrolujte. Ak je akákoľvek časť poškodená, výrobok nepoužívajte, dokým nebude opravený autorizovaným servisom.

Vyrobené v súlade s CE štandardami.



Ochrana životného prostredia:

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zadarmo.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie.

VAROVANIE



Nepoužívajte výrobok bez prestávky dlhšie ako 30 minút, môže sa aktivovať ochrana proti prehriatiu a prevádzka prístroja sa automaticky ukončí. Skôr, než začnete prístroj znova používať, počkajte dokým nevychladne - aspoň 30 minút.

VIBRA BELT GENIUS

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PROSÍM, PREČÍTAJTE SI POZORNE TENTO NÁVOD SKÔR, AKO ZAČNETE PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ.

VIBRA BELT GENIUS je dokonale skonštruovaný pás, ktorý využíva unikátny oscilačný masážny pohyb, ktorý simuluje pohyb pri tradičných terapeutických masážach. **VIBRA BELT GENIUS** poskytne Vášmu telu efektívnu tonizujúcu starostlivosť. Stane sa výborným pomocníkom v dnešnom hektickom životnom štýle, posilní a uvoľní telo aj myseľ.

VIBRA BELT GENIUS

Pomáha odbúrať tuk, podporuje aktivitu lymfatického systému.

Podporuje činnosť tráviaceho systému, zlepšuje absorbciu živín, prečisťuje pleť.

Prehrieva oblasť tela okolo pásu, s teplotou od 31°C to 60°C, zlepšuje tak prekrvenie pokožky.

Športová masáž – Poskytuje starostlivosť hlavnej skupine svalov, pôsobí ako prevencia zranenia svalov a predlžuje aktívny športový život.

Psychoterapia – Simuluje tradičnú terapiu masážou.

VAROVANIE

- Tehotné ženy nesmú prístroj používať.

- Nepoužívajte prístroj, ak ste nemocní. Ak trpíte onemocnením srdca a ciev alebo iným onemocnením, konzultujte používanie prístroja s lekárom.

- Ak cítite pri používaní prístroja akékoľvek nepohodlie, ihneď prestaňte prístroj používať.

- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte adaptér z elektrickej siete.

- Prístroj nerozoberajte, sami neopravujte ani nijako nemeňte. Všetky opravy zverte len odbornému servisnému stredisku.

- Prístroj nepoužívajte, ak máte vlhké alebo mokré ruky.

- Prístroj nepoužívajte, ak sú prírodné káble, adaptér alebo prístroj akokoľvek poškodené.

- Nepoužívajte prístroj v miestnosti, kde je vysoká teplota alebo vlhkosť.


SÚPRAVA OBSAHUJE:

Hlavnú vibračnú masážnu jednotku s príručným ovládačom

Adaptér

Návod na používanie

Funkčné tlačidlá na ovládači

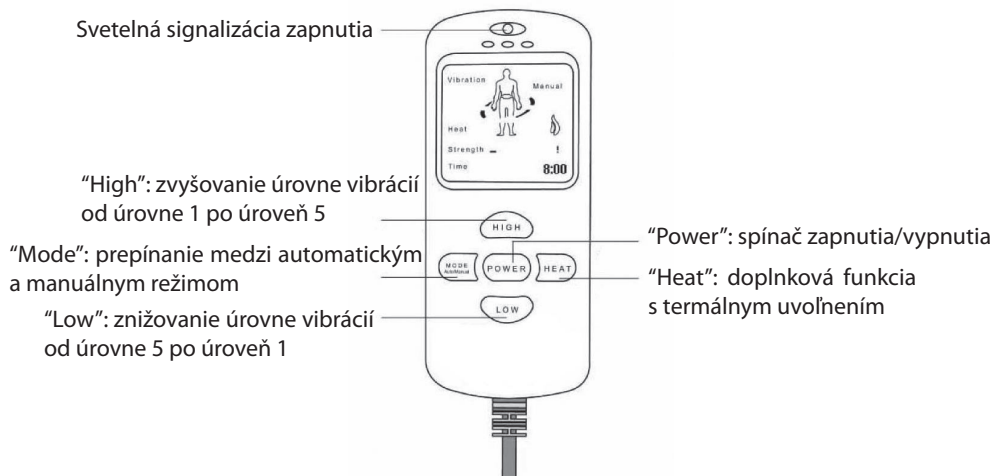

Popis prístroja



Charakteristika VIBRA BELTu GENIUS

Automatická zmena režimu (automaticky beží v cykloch od úrovne 1 po úroveň 5)

Manuálny režim (dostupný od úrovne 1 po úroveň 5 – voliteľný výber)

5 úrovní pre každý režim

Funkcia prehriatia od 31°– 60 °C

Funkcia automatického vypnutia po 10 minútach

"Power": spínač zapnutia/vypnutia

"Mode": prepínanie medzi automatickým a manuálnym režimom

"High": zvyšovanie úrovne vibrácií od úrovne 1 po úroveň 5

"Low": znižovanie úrovne vibrácií od úrovne 5 po úroveň 1

“Heat”: doplnková funkcia s termálnym uvoľnením

Ako pracovať s jednotkou

- 1) Pás si opásajte okolo tela a nastavte veľkosť pomocou suchých zipsov.
- 2) Konektor adaptéra zapojte do dierky na jednotke.
- 3) Konektor sieťového kábla zapojte do adaptéra. Až teraz zapojte zástrčku do elektrickej siete. (Uistite sa, že napätie uvádzané na typovom štítku prístroja je v súlade s napätím v elektrickej sieti.)
- 4) Akonáhle zapojíte prístroj do elektrickej siete, rozsvieti sa kontrolka oranžovým svetlom. Prístroj je pripravený – nastaví sa režim standby a automatický režim.
- 5) Pokiaľ si prajete, aby bežal len režim prehrievania, stlačte tlačidlo **HEAT**. Jednotka začne vydávať teplo od **31° C – 60° C**, teplota sa bude meniť každú minútu. Tento režim sa tiež automaticky vypne po 10 minútach.
- 6) Pre spustenie vibračnej masáže zapnite jednotku stlačením tlačidla **POWER** jedenkrát, potom začne prístroj pracovať v automatickom režime. Pokiaľ si prajete spustiť manuálny režim, stlačte tlačidlo **MODE**.

Automatický režim (svieti ZELENÁ kontrolka)

V tomto režime začne jednotka automaticky bežať na úrovni 2. Automaticky sa budú striedať jednotlivé úrovne. Pokiaľ si prajete, aby štartovacia úroveň vibrácie bola iná, môžete stlačiť tlačidlo **HIGH** (na zvýšenie úrovne) alebo **LOW** (na zníženie úrovne).

Maximálna úroveň je 5, minimálna 1. 1 » 2 » 3 » 4 » 5

Manuálny režim (svieti ČERVENÁ kontrolka)

Úroveň nahor (tlačidlo HIGH) 1 » 2 » 3 » 4 » 5

Úroveň nadol (tlačidlo LOW) 1 « 2 « 3 « 4 « 5

Pokiaľ stlačíte tlačidlo **LOW** alebo **HIGH**, budete počuť zvuk pípnutia. Pokiaľ už nebudete počuť žiadny zvuk, znamená to, že nasledujúca úroveň nejde zvoliť.

Pre zmenu režimu môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo **MODE**.

Bezpečnostná ochrana – Prevencia prehriatia, prístroj je designovaný s 2 ventilačnými otvormi na hornej strane pásu.

Prístroj je skonštruovaný s automatickým časovačom. **VIBRA BELT GENIUS** začne automaticky odpočítavať 10 minút po zapnutí a automaticky sa vypne po uplynutí 10 minút.

Užívateľ môže kedykoľvek ukončiť chod prístroja stlačením tlačidla **POWER**.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Počas používania adaptéru sa jednotka mierne zahrieva, tento jav je normálny.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, uistite sa, že je adaptér odpojený z elektrickej siete.
- Udržujte prístroj mimo dosahu detí.
- Skladujte výrobok a jeho príslušenstvo v originálnom balení.
- Neskladujte v mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu ani vo vlhkom prostredí.
- Na prístroj nekladte žiadne predmety, mohli by poškodiť jemnú elektroniku vo vnútri.
- Pred čistením pás nechajte najskôr vychladnúť. Vždy odpojte z elektrickej siete! Môžete použiť jemnú suchú handričku.
- Výrobok **NESMIETE** prať. Chráňte pred akýmkoľvek kontaktom s vodou a vlhkosťou.