


MASÁŽNY GOLIER PRE KRK A RAMENÁ *NECKY*

Návod na použitie

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou tohto výrobku. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.

Popis masážneho zariadenia

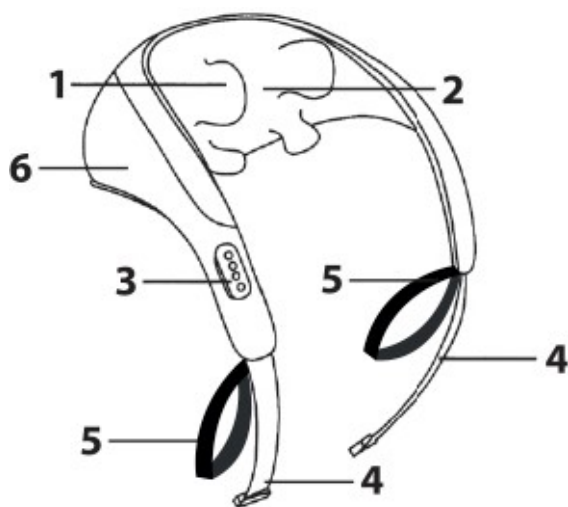


1. Masážna hlava
2. Pasívne infračervené vyhrievanie
3. Ovládací panel
4. Elastický popruh s prackou
5. Rukoväť na nastavenie tlaku
6. Odnímateľný poťah (so zipsom), prateľný v jemnom cykle pri 40 °C.

Nabíjateľná batéria

Pred prvým použitím úplne nabite vstavanú batériu pomocou priloženého kábla USB-C. Druhý koniec by mal byť pripojený k štandardnému napájaciemu zdroju USB 5 V/1 A-3,1 A (nie je súčasťou balenia) alebo k portu USB na vašom počítači.


Doba nabíjania je približne 4 hodiny.

1. Nabíjací port USB-C
2. USB kábel
3. USB napájací zdroj (nie je súčasťou balenia)

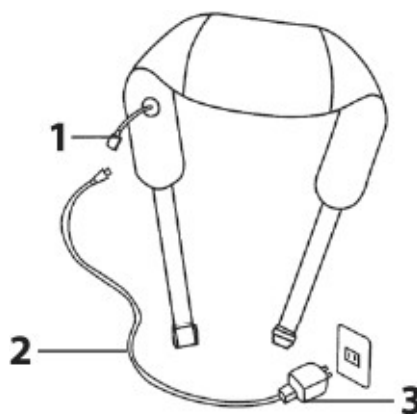


Správna inštalácia zariadenia

Nasaďte si obojok okolo krku tak, aby ovládací panel bol na pravej strane. Upevnite elastický remienok na zadnej strane. Tlak môžete nastaviť pomocou rukoväte.

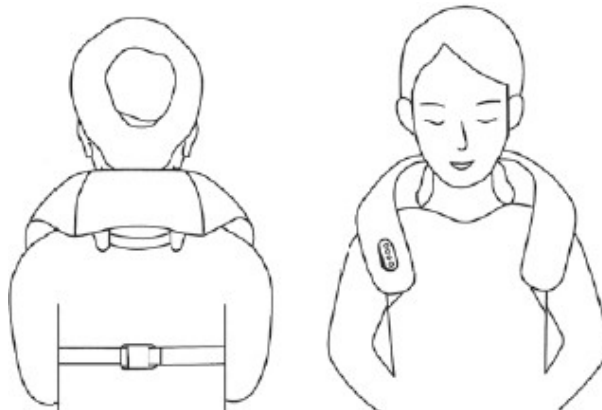

Ovládani-

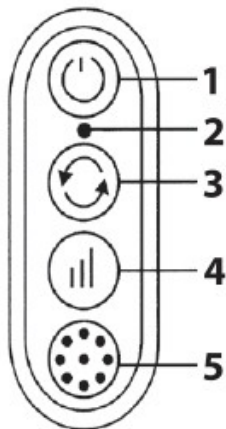

1. Tlačidlo ON/OFF. Zariadenie začne fungovať, keď stlačíte a podržíte tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Po 10 minútach masáže sa automaticky vypne.
2. Kontrolka nabíjania – červená bliká, zelená svieti, keď je zariadenie úplne nabité. Plné nabitie trvá približne 4 hodiny.
3. Výber jedného z 3 prevádzkových režimov (smer masáže)
4. Vyberte intenzitu masáže
5. Zapnutie/vypnutie pasívneho infračerveného ohrevu

Dôležité.

Zariadenie je vybavené lítium-iónovou batériou. Aby bola zachovaná plná funkčnosť, batéria by sa mala nabíjať aspoň raz za 3 mesiace. Pred prvým použitím odporúčame batériu úplne nabiť.

Čistenie zariadenia

Dôležité. Vzhľadom na elektronické komponenty sa zariadenie nesmie namočiť (kontakt s vodou). V žiadnom prípade neodstraňujte ani neotvárajte hlavný kryt masážneho zariadenia. Neoprávnené otvorenie má za následok zrušenie záruky.

Eko-kožený kryt je možné čistiť vlhkou mikrovláknovou utierkou a jemným čistiacim prostriedkom na eko-kožu.

Z hygienických dôvodov je možné kryt masážnej hlavice ľahko odstrániť pomocou zipsového zapínania, prať v jemnom cykle pri 40 °C a po vysušení opäť pripevniť k zariadeniu.

Bezpečnostné opatrenia

Ak máte problémy s chrbticou, krčnou a bedrovej chrbticou, osteoporózou, kožnými problémami, abnormálnymi pocitmi v nervoch horných končatín a dolnej časti tela, pred použitím masážneho zariadenia sa poraďte s kompetentným lekárom. **Odporúčame tiež opatrnosť a prípadnú konzultáciu s lekárom v prípade tehotenstva.**

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Používatelia musia byť riadne oboznámení s návodom na použitie. Pre bezpečnosť vašich detí si prečítajte všetky pokyny a varovania v tomto návode.

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení Keď produkt dosiahne koniec svojej životnosti alebo keď by jeho oprava bola neekonomická, nevyhadzujte ho do domového odpadu. Na správnu likvidáciu odneste produkt na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú. Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s národnými predpismi. Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte ich do zberného miesta na recykláciu batérií.

Servis

Ak po zakúpení produktu zistíte akúkoľvek vadu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov v priloženom návode na použitie. Reklamácie nebudú akceptované, ak ste produkt upravili alebo nedodržali pokyny v návode na použitie

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzenému opotrebeniu funkčných častí produktu v dôsledku jeho používania
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou produktu (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu atď.)
- závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie v dôsledku pádu, nárazu, úderu atď.
- poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nevhodných náradia atď.

V prípade výrobkov, ktoré sú predmetom reklamácie a ktoré neboli počas prepravy riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu, znáša riziko poškodenia výlučne vlastník.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za tlačové chyby. Ilustrácie a popisy sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.